

NIO 3MP LED Display



Manuale dell'utente

MDNG-3220

Barco nv

President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium

Phone: +32 56.23.32.11

Fax: +32 56.26.22.62

Supporto: www.barco.com/esupport

Visitate il web: www.barco.com

Stampato in Belgio

TAVOLA CONTENUTI

1. Benvenuti	3
1.1 Prodotto	3
1.2 Contenuto della confezione	3
2. Parti, comandi e connettori	5
2.1 Vista anteriore del display	5
2.2 Vista posteriore del display	6
3. Installazione del display	9
3.1 Sblocco del meccanismo di regolazione dell'altezza	9
3.2 Regolazione della posizione dello schermo	9
3.3 Rimozione del copri scomparto dei connettori	10
3.4 Collegamento dei cavi di segnale	10
3.5 Instradamento dei cavi e nuovo fissaggio del copri scomparto dei connettori	12
3.6 Installazione del supporto VESA	13
3.7 Primo avvio	14
4. Funzionamento giornaliero	17
4.1 Raccomandazioni per il funzionamento giornaliero	17
4.2 Spie dei tasti	18
4.3 Passaggio alla modalità stand-by	18
4.4 Visualizzazione dei menu OSD	18
4.5 Spostamento nei menu	19
5. Funzionamento avanzato	21
5.1 Lingua del menu OSD	21
5.2 Menu Timer OSD	21
5.3 Funzione di blocco alimentazione	21
5.4 Menu stato di alimentazione	22
5.5 Modalità DPMS	22
5.6 Funzionalità dello schermo	22
5.7 Target di luminanza	23
5.8 Modalità di visualizzazione	24
5.9 Sala di lettura	24
5.10 Segnale in ingresso	25
5.11 Orientamento schermo	25
5.12 Intervalli EDID	26
5.13 RGB->Y	26
5.14 Informazioni di visualizzazione	27
5.15 Stato del display	27
6. Manutenzione	29
6.1 Istruzioni per la pulizia	29
7. Informazioni importanti	31
7.1 Informazioni di sicurezza	31
7.2 Informazioni ambientali	33
7.3 Informazioni di conformità normativa	35
7.4 Avviso EMC	36
7.5 Spiegazione dei simboli	39
7.6 Liberatoria	42
7.7 Specifiche tecniche	42
8. Risoluzione dei problemi	45
8.1 Risoluzione dei problemi	45
8.2 Segnali di avvertenza	45

1. BENVENUTI

1.1 Prodotto

Informazioni generali

Grazie per aver scelto NIO 3MP LED Display.

NIO 3MP LED Display è un sistema di visualizzazione in scala di grigi da 3MP standard di settore dotato di retroilluminazione a LED per un'affidabile visualizzazione delle immagini diagnostiche ultra luminose. NIO 3MP LED Display offre una soluzione di visualizzazione efficace per una serie di applicazioni e modalità, tra cui PACS 3D, ecocardiografia tridimensionale, ecografia, immagini ortopediche, CAD, fusione di immagini, medicina nucleare e PET.

oltre 50 sfumature di grigio

Dotato di retroilluminazione a LED ultra-luminosa, NIO 3MP LED Display offre una luminosità eccellente e un numero maggiore di sfumature di grigio in modo da rilevare più velocemente i minimi dettagli. L'unico sensore anteriore assicura la visualizzazione continua di immagini fedeli e precise per diagnosi affidabili.

Controlli di qualità delle immagini su richiesta

Poiché il sensore anteriore funziona senza sosta in collaborazione con il servizio online MediCal QAWeb di Barco per un'assicurazione di qualità e una calibrazione automatizzate, NIO 3MP LED Display assicura una visualizzazione perfetta delle immagini DICOM, selezionando solo un pulsante, senza interrompere il flusso di lavoro.

Un buon investimento

Grazie alla retroilluminazione a LED a basso consumo energetico, NIO 3MP LED Display permette di risparmiare sul consumo energetico offrendo nel contempo un'elevata luminosità. Poiché utilizza poca energia, il display produce meno calore e richiede minore raffreddamento, che influisce sulla manutenzione e sui costi operativi. Inoltre, la retroilluminazione a LED consente una lunga durata d'uso, nonostante l'elevata luminosità, favorendo un elevato ritorno a livello di investimento.



ATTENZIONE: Leggere tutte le importanti informazioni di sicurezza prima di installare e utilizzare NIO 3MP LED Display. Fare riferimento al relativo capitolo della presente guida.

1.2 Contenuto della confezione

Informazioni generali

NIO 3MP LED Display viene consegnato dotato di:

- lo schermo
- una base inclinabile e girevole per il sistema
- Guida dell'utente di NIO 3MP LED Display
- un CD di sistema
- un cavo DisplayPort
- un cavo DVI
- un cavo USB
- un cavo di alimentazione CA
- un alimentatore esterno

1. Benvenuti

Se è stata ordinata una scheda video Barco, essa si trova nella confezione insieme ai suoi accessori. Il manuale dell'utente dedicato si trova nel CD di sistema.



Conservare l'imballo originale appositamente progettato per il display e ideale per proteggerlo durante il trasporto e la conservazione.

2. PARTI, COMANDI E CONNETTORI

2.1 Vista anteriore del display

Informazioni generali

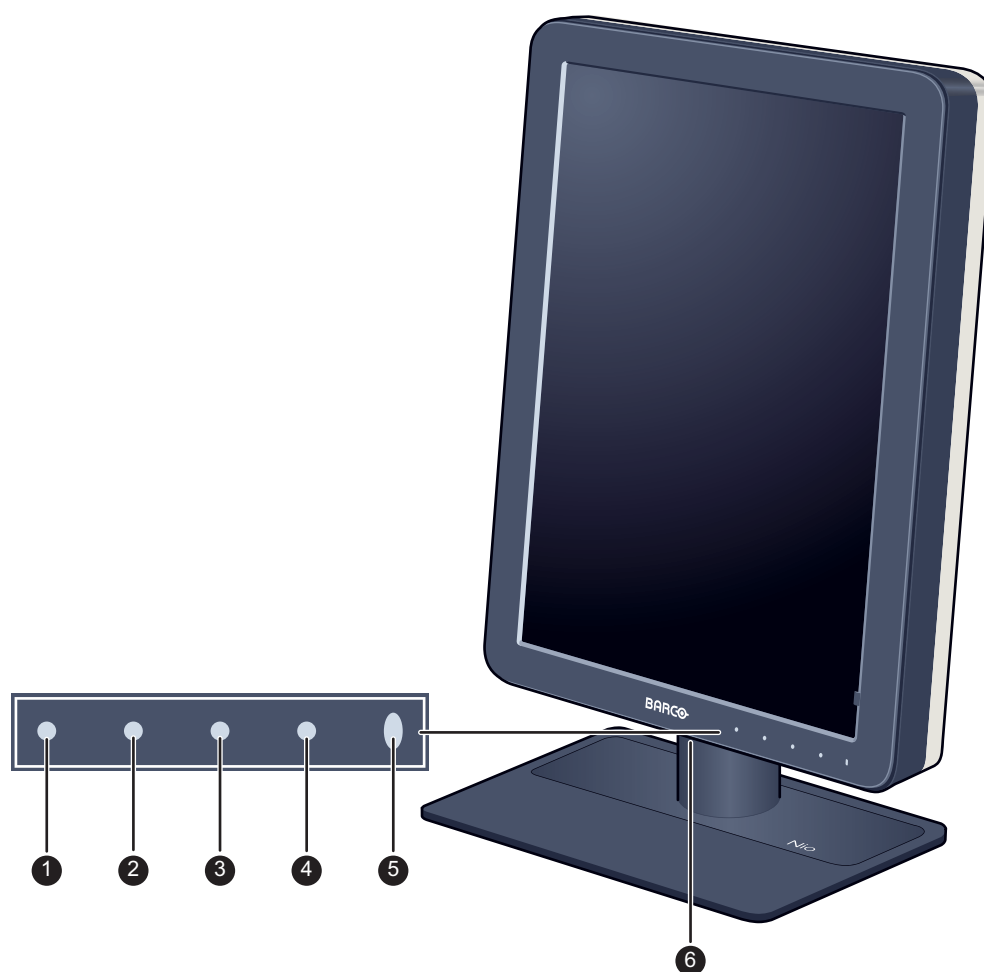


Immagine 2-1
Vista frontale

- | | | | |
|---|-------------------|---|--------------------------|
| 1 | Tasto di sinistra | 4 | Tasto Standby |
| 2 | Tasto di destra | 5 | LED di accensione |
| 3 | Tasto Menu | 6 | USB downstream inferiore |



Le icone dei tasti vengono visualizzate sopra gli stessi tasti, adattate alla funzione utilizzata (a seconda del menu). Vedere "Spostamento nei menu", pagina 19.

2.2 Vista posteriore del display

Coperchio dello scomparto connettori chiuso

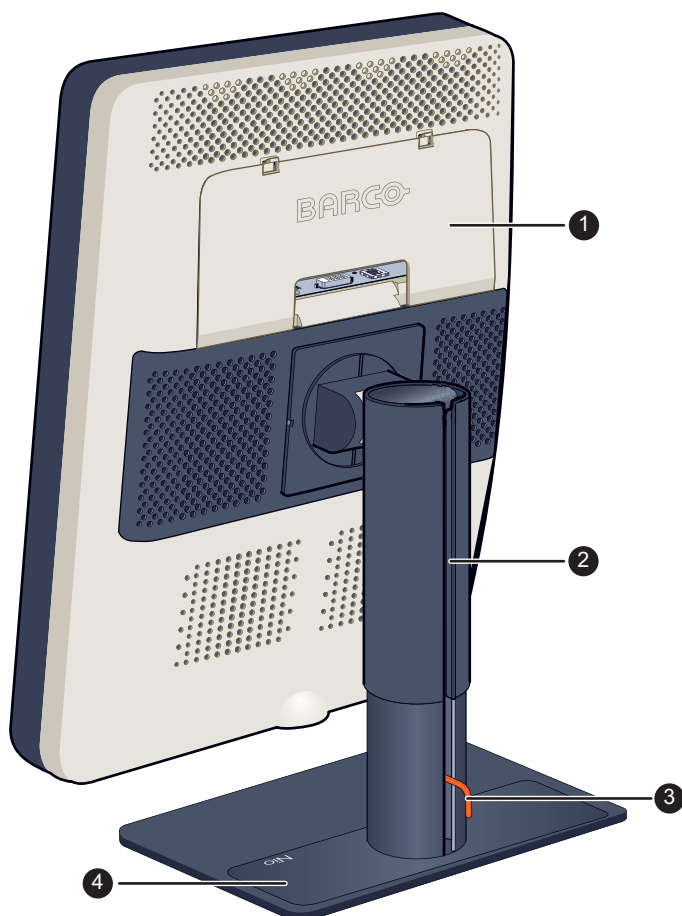


Immagine 2-2

Vista posteriore con copri scomparto connettori chiuso

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1 Copri scomparto connettori | 3 Fermo base |
| 2 Canalina | 4 Base inclinabile e girevole |

Coperchio dello scomparto connettori aperto

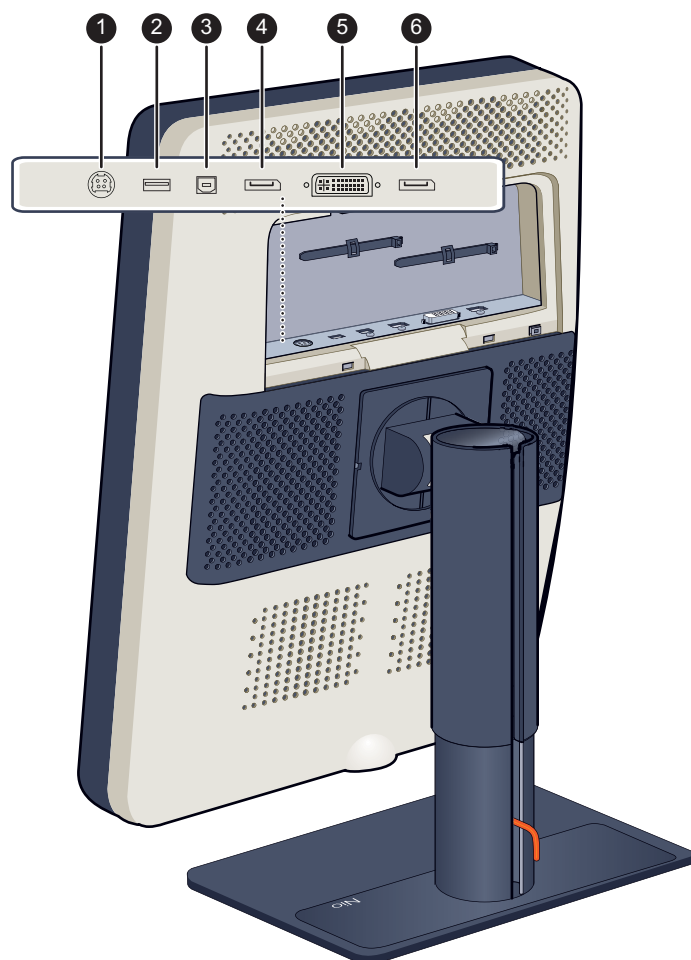


Immagine 2-3

Vista posteriore con copri scomparto connettori aperto.

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 Ingresso alimentazione +24 V CC | 4 Uscita video DisplayPort |
| 2 Porta USB downstream | 5 Ingresso video DVI |
| 3 Connettore USB upstream | 6 Ingresso video DisplayPort |

3. INSTALLAZIONE DEL DISPLAY




Prima dell'installazione NIO 3MP LED Display e della connessione di tutti i necessari cavi, assicurarsi che nel computer sia stata installata fisicamente un'ideale scheda video. Se si utilizza una scheda video Barco, consultare il manuale dell'utente in dotazione con il dispositivo.

3.1 Sblocco del meccanismo di regolazione dell'altezza

Per rimuovere il fermo:

1. Posizionare lo schermo con il retro verso di sé.
2. Estrarre il fermo dai fori di fissaggio della base.

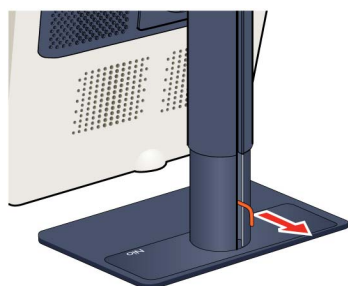


3. Lasciare il fermo nel foro predisposto per un eventuale trasporto futuro dello schermo.

3.2 Regolazione della posizione dello schermo

Per regolare la posizione del display

1. Con la parte frontale del pannello rivolta verso di sé, afferrare il pannello da entrambi i lati.
2. Molto importante: Inclinare il pannello verso l'alto prima di modificare l'orientamento.

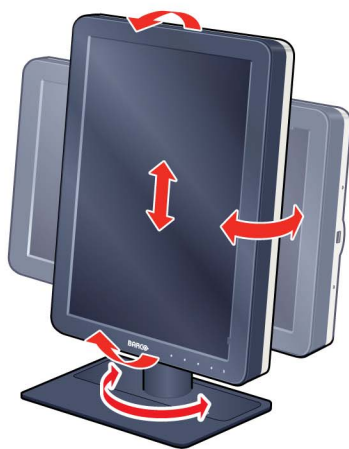

3. Per passare dall'orientamento verticale a quello orizzontale, ruotare il pannello in senso antiorario.
4. Per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale, ruotare il pannello in senso orario.




Se, dopo aver installato lo schermo del sistema completo, viene modificato l'orientamento del pannello mentre sullo schermo è visualizzata un'immagine, il risultato dipenderà dalla scheda video e dalla risoluzione dell'immagine. In alcuni casi, l'immagine verrà ruotata automaticamente, in altri non verrà ruotata (ad esempio nei casi in cui la rotazione provocherebbe la perdita di pixel). Se necessario, modificare la risoluzione delle immagini nel Pannello di controllo del computer, quindi riavviare il sistema dopo aver modificato l'orientamento.

3.3 Rimozione del coperchio scomparto dei connettori

Rimuovere il coperchio scomparto dei connettori.

1. Premere delicatamente le due linguette sulla parte superiore del coperchio
2. Tirare la parte superiore del coperchio allontanandola leggermente dallo schermo e sollevare il coperchio verso l'alto.

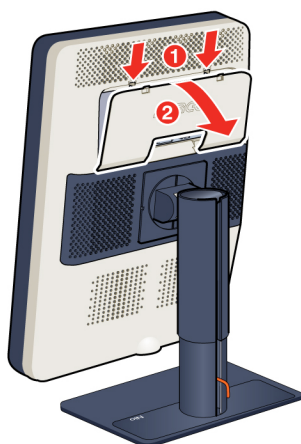

3.4 Collegamento dei cavi di segnale




ATTENZIONE: Collegare solo uno dei due collegamenti video. Se si collegano entrambi gli ingressi contemporaneamente, si verificheranno degli errori di driver.

Per collegare i cavi di segnale allo schermo:


Per accedere ai connettori, rimuovere il coperchio dello scomparto dei connettori. Vedere "Rimozione del coperchio scomparto dei connettori", pagina 10.

È possibile collegare lo schermo a una scheda video utilizzando la connessione DVI o DP. La selezione degli ingressi del dispositivo viene eseguita automaticamente. Per impostazione predefinita, l'ingresso DisplayPort ha la priorità rispetto all'ingresso DVI. Questa funzione può essere modificata nel menu OSD.

1. Collegare il cavo DVI o DP della scheda video al connettore DVI o DP dello schermo.

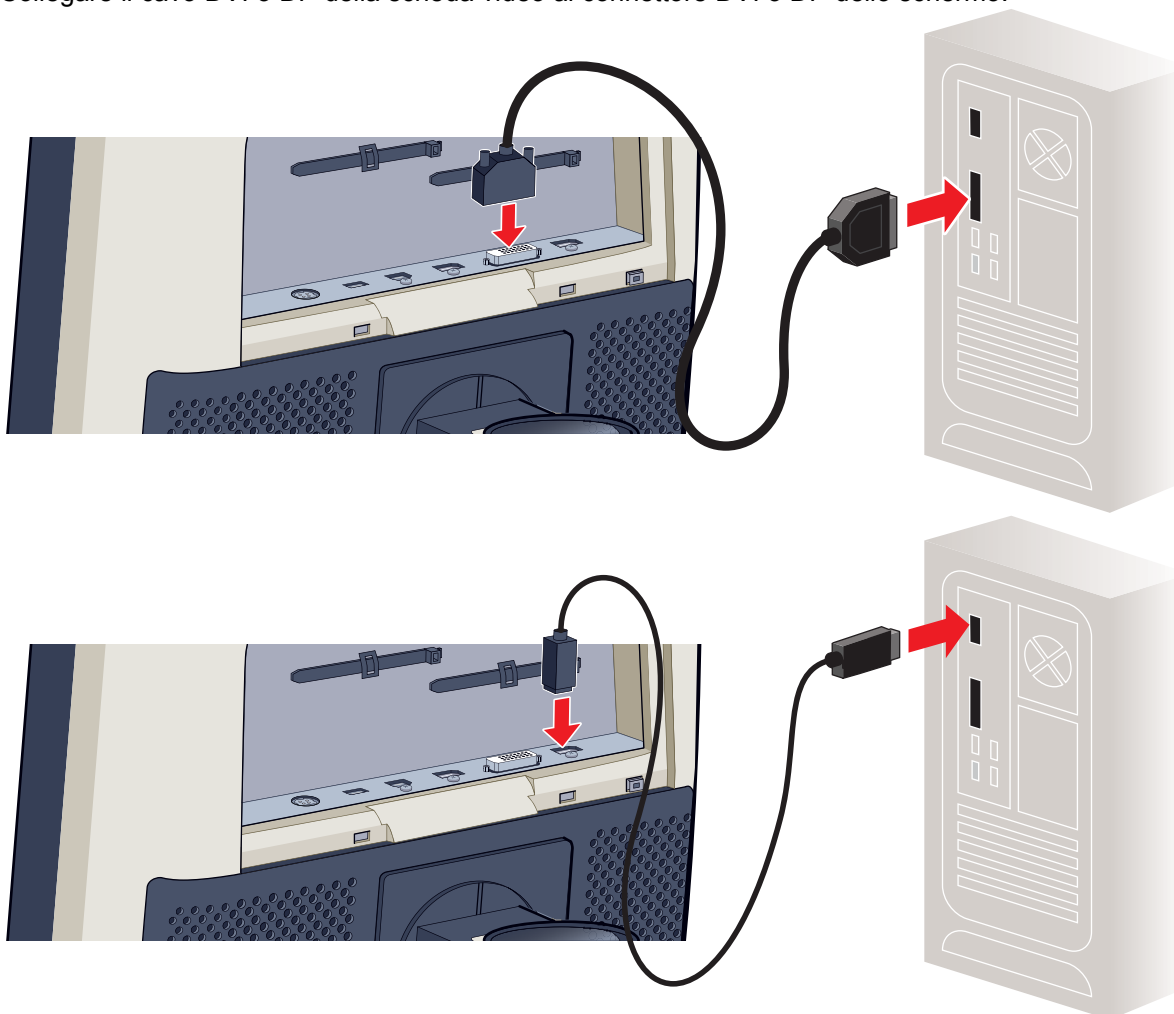


2. Se si desidera utilizzare la porta USB upstream dello schermo, collegare una porta USB downstream del computer alla porta USB upstream dello schermo.

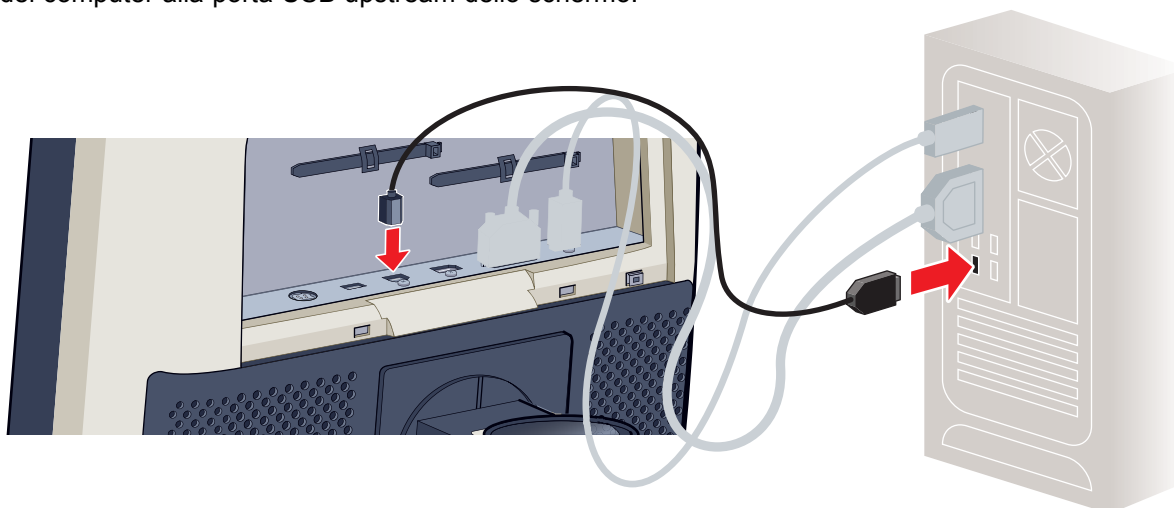

3. Se si è scelto di utilizzare la porta USB downstream dello schermo, collegare un dispositivo USB al connettore downstream.
4. Se si desidera utilizzare un secondo display, collegare il connettore di uscita video DisplayPort.

3. Installazione del display


5. Collegare l'alimentatore CC esterno in dotazione all'ingresso +24 V CC dello schermo.
6. Collegare il connettore di rete dell'alimentatore CC esterno a una presa di alimentazione **con messa a terra** per mezzo dei cavi di alimentazione in dotazione.

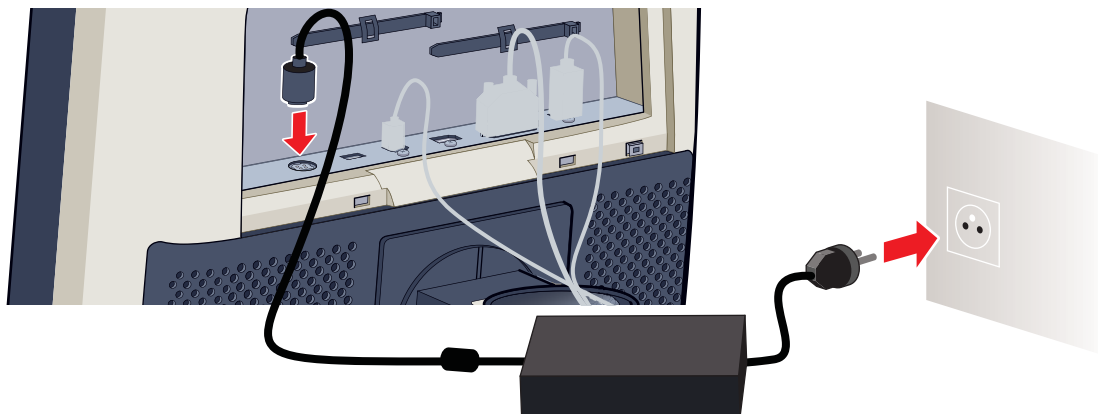

3.5 Instradamento dei cavi e nuovo fissaggio del copri scomparto dei connettori.

Per disporre i cavi


1. Inserire tutti i cavi collegati attraverso il canale di disposizione dei cavi nel supporto del display.

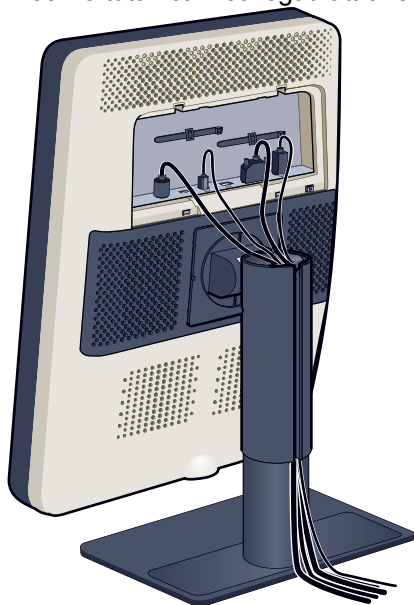

Suggerimento: Le fascette dei cavi all'interno dello scomparto dei connettori consentiranno di fissare i cavi per una loro migliore schermatura.

Per fissare nuovamente il copri scomparto dei connettori

1. Fissare nuovamente il coperchio dello scomparto dei connettori facendo scorrere la parte inferiore del coperchio in posizione, quindi spingere la parte superiore. Quando questo coperchio è in posizione, si dovrebbe sentire il rumore dello “scatto” dei fermi.

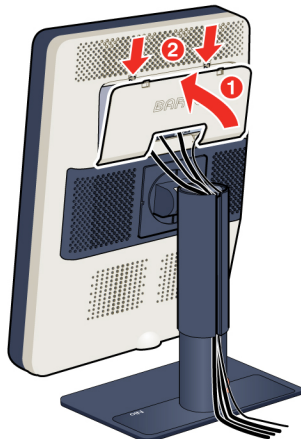

3.6 Installazione del supporto VESA



ATTENZIONE: Utilizzare un idoneo dispositivo di montaggio per evitare il rischio di lesioni.



ATTENZIONE: Non tirare o spingere mai uno schermo fissato a un braccio per spostarlo. Assicurarsi piuttosto che il braccio sia dotato di un'impugnatura conforme allo standard VESA e utilizzare questa per spostare lo schermo.

Fare riferimento al manuale di istruzioni del braccio per ulteriori informazioni e istruzioni.



ATTENZIONE: Utilizzare un braccio approvato da VESA (in conformità allo standard VESA 100 mm).

Utilizzare un braccio in grado di sostenere il peso dello schermo. Consultare le specifiche tecniche di questo schermo per il peso applicabile.

Informazioni generali

Il pannello, fornito sulla base inclinabile e girevole, è compatibile con lo standard VESA 100 mm. Può pertanto essere usato con un braccio di supporto in conformità allo standard VESA 100 mm.


In tal caso, la base inclinabile e girevole dovrà essere rimossa dal pannello.

3. Installazione del display


1. Porre lo schermo nella posizione più bassa e fissare il meccanismo di altezza; vedere "Sblocco del meccanismo di regolazione dell'altezza", pagina 9.




2. Posizionare lo schermo con la parte frontale su una superficie morbida, facendo attenzione a non danneggiarlo.
3. Rimuovere il coperchio in plastica con il giravite a punta piatta.

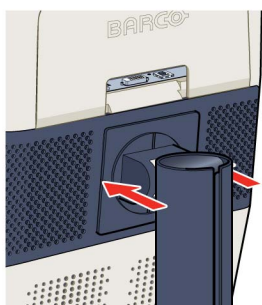

4. Far scorrere il coperchio in plastica sul collo della base.

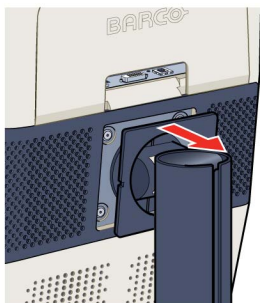

5. Rimuovere le quattro viti che fissano la base reggendo la base stessa.

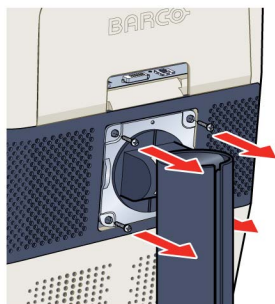

6. Fissare **saldamente** il braccio di supporto al pannello utilizzando 4 viti M4 x 8 mm.

3.7 Primo avvio

Informazioni generali

NIO 3MP LED Display è pronto per essere avviato per la prima volta.

1. Accendere NIO 3MP LED Display come descritto in "Passaggio alla modalità stand-by", pagina 18.
2. Accendere il computer collegato allo schermo.

Se lo schermo e la scheda video sono stati installati correttamente, al termine della procedura di avvio compaiono i messaggi di installazione di Windows.



Al primo avvio, NIO 3MP LED Display funzionerà in modalità video di base alla frequenza di aggiornamento predefinita. Se si utilizza una scheda video Barco, consultare il manuale dell'utente in dotazione con il dispositivo per installare i driver, il software e la documentazione. Al termine, lo schermo rileverà automaticamente i segnali di ingresso video connessi e applicherà la corretta modalità video e frequenza di aggiornamento.

4. FUNZIONAMENTO GIORNALIERO

4.1 Raccomandazioni per il funzionamento giornaliero

Ottimizzazione della durata dello schermo

Attivando la modalità Display Power Management System (DPMS) dello schermo si ottimizzerà la durata utile diagnostica disattivando automaticamente la retroilluminazione stessa quando lo schermo non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo. Per impostazione predefinita, il DPMS è abilitato sullo schermo, ma deve essere attivato anche sulla workstation. Per effettuare questa operazione, scegliere "Opzioni risparmio energia" in "Pannello di controllo".



Barco consiglia di impostare l'attivazione del DPMS trascorsi 20 minuti di inattività.

Utilizzo di uno screen saver per evitare la ritenzione dell'immagine

Il funzionamento prolungato di uno schermo LCD con la visualizzazione dello stesso contenuto sulla stessa area può comportare la ritenzione dell'immagine.

È possibile evitare o ridurre significativamente questo fenomeno utilizzando uno screen saver. Lo screen saver può essere attivato nella finestra di dialogo "Proprietà - Schermo" della workstation.



Barco consiglia di impostare l'attivazione dello screen saver trascorsi 5 minuti di inattività. Un buono screen saver visualizza contenuto in movimento.

Se si lavora per più ore consecutive con la stessa immagine o con un'applicazione che presenta elementi grafici statici (e lo screen saver non viene pertanto attivato), modificare regolarmente il contenuto delle immagini per evitare la ritenzione degli elementi statici.

La tecnologia pixel

Gli schermi LCD impiegano una tecnologia basata sui pixel. Come normale tolleranza nella produzione di LCD, un numero limitato di questi pixel può rimanere spento o costantemente acceso, senza compromettere le prestazioni diagnostiche del prodotto. Per garantire la massima qualità del prodotto, Barco applica rigidi criteri di selezione per i propri pannelli LCD.



Per ulteriori informazioni sulla tecnologia LCD e sui pixel mancanti, consultare le pubblicazioni specifiche disponibile sul sito www.barco.com/healthcare.

Maggiore comfort per l'utente

Ciascun sistema di visualizzazione Barco a più schermi presenta una corrispondenza del colore basata sulle massime specifiche del mercato.



Barco consiglia di utilizzare insieme gli schermi con corrispondenza del colore. È inoltre importante utilizzare tutti gli schermi di una configurazione a più schermi alla stessa frequenza per preservare la corrispondenza del colore per tutta la durata utile del sistema.

Ottimizzare la garanzia di qualità

Il sistema "MediCal QAWeb" offre assistenza online per una garanzia di qualità di alto livello, per un'attendibilità diagnostica e tempi di attività massimi.



Barco raccomanda almeno di installare MediCal QAWeb Agent e di adottare la procedura QAWeb predefinita. Questa procedura contempla la calibratura a intervalli regolari. La connessione a MediCal QAWeb Server offre ancora più possibilità.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi al livello gratuito Essential di MediCal QAWeb, visitare il sito www.barco.com/healthcare/ga.

4.2 Spie dei tasti

Spie dei tasti

Per impostazione predefinita, le spie dei tasti ridurranno la loro luminosità rendendoli non disponibili in tale momento. Selezionare uno dei tasti per illuminarli e renderli disponibili a ulteriori operazioni. Di conseguenza tutti i tasti si illuminano e sono nuovamente disponibili per ulteriori operazioni. Tuttavia, se non vengono eseguite altre azioni entro i successivi 5 secondi, i tasti riducono nuovamente la loro luminosità.

4.3 Passaggio alla modalità stand-by

Passaggio alla modalità stand-by

È possibile attivare o disattivare lo schermo mentre è in modalità stand-by:

1. Illuminando i tasti come precedentemente descritto;
2. Selezionare il tasto stand-by per circa due secondi quando i tasti sono illuminati.

Di conseguenza lo schermo si attiverà o passerà in modalità stand-by. Quando lo schermo è **attivo**, il LED di alimentazione è **verde**. Quando lo schermo è in **modalità stand-by**, il LED di alimentazione è **arancione**.



Il comportamento del LED di alimentazione, quando il display è acceso, è modificabile nei menu OSD. Fare riferimento a "Menu stato di alimentazione", pagina 22 per istruzioni dettagliate su come eseguire tale operazione.



Nel caso di ripristino dopo un'interruzione di corrente, lo schermo si avvierà sempre nella modalità di alimentazione in cui si trovava prima dell'interruzione (ovvero stand-by o attiva). Ciò consente di proteggere lo schermo da involontari problemi di mantenimento dell'immagine.

4.4 Visualizzazione dei menu OSD


Modalità di visualizzazione dei menu OSD

Il menu OSD permette di configurare diverse impostazioni per consentire a NIO 3MP LED Display di adattarsi alle esigenze dell'operatore nel proprio ambiente di lavoro. Inoltre tramite il menu OSD, è possibile recuperare le informazioni generali sul display e sulle attuali impostazioni di configurazione.

È possibile visualizzare i menu OSD tramite le seguenti operazioni:

1. Se questa operazione non è già stata eseguita, attivare lo schermo come descritto in precedenza.
2. Illuminando i tasti come precedentemente descritto;
3. Selezionando il tasto del menu quando i tasti sono illuminati.

Di conseguenza, il menu principale OSD sarà visualizzato nell'angolo inferiore destro dello schermo. Tuttavia, se non vengono eseguite altre azioni entro i successivi 30 secondi, il menu OSD scompare di nuovo.

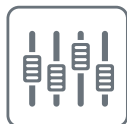

È possibile regolare il tempo di chiusura automatica dell'OSD. Fare riferimento a "Menu Timer OSD", pagina 21 per istruzioni dettagliate su come eseguire tale operazione.

4.5 Spostamento nei menu

Spostamento nei menu OSD

È possibile spostarsi tra i menu OSD tramite le seguenti operazioni:

- Utilizzare i tasti sinistra/destra nei (sotto)menu, modificare valori o eseguire selezioni.
- Utilizzare il tasto dei menu per passare a un sottomenu o confermare regolazioni e selezioni.
- Utilizzare il tasto di stand-by per annullare le regolazioni o uscire da un (sotto)menu.



Le icone dei tasti vengono visualizzate sopra gli stessi tasti, adattate alla funzione utilizzata (a seconda del menu).

Descrizione delle icone dei tasti



Sinistra, Destra



Menu



Invio



Annulla



Standby (IEC 60417-5009)

5. FUNZIONAMENTO AVANZATO

5.1 Lingua del menu OSD

Lingua del menu OSD

Per impostazione predefinita, il menu OSD è in lingua inglese. Tuttavia, è disponibile un'ampia varietà di lingue per il menu OSD dello NIO 3MP LED Display.

Per modificare la lingua del menu OSD:

1. Visualizzare il menu principale OSD.
2. Visualizzare il menu *Configurazione > Interfaccia utente*.
3. Passare al sottomenu *Lingua*.
4. Selezionare una delle lingue disponibili, quindi confermare.

5.2 Menu Timer OSD

Informazioni sul menu Timer OSD

Per impostazione predefinita, il menu OSD scomparirà automaticamente dopo circa 30 secondi di inattività. Tuttavia, questo periodo è regolabile da un minimo di 5 a un massimo di 60 secondi.

Per regolare il tempo dell'OSD:

1. Visualizzare il menu principale OSD.
2. Visualizzare il menu *Configurazione > Interfaccia utente*.
3. Passare al sottomenu *Timer OSD*.
4. Selezionare il tempo di sospensione dell'OSD desiderato, quindi confermare.

5.3 Funzione di blocco alimentazione

Funzione di blocco alimentazione

Se si attiva la funzione di blocco dell'alimentazione, NIO 3MP LED Display è costretto a rimanere acceso. Ciò significa che non può passare in modalità stand-by finché non si disattiva di nuovo la funzione di blocco alimentazione.

Per attivare/disattivare la funzione di blocco alimentazione:

1. Visualizzare il menu principale OSD.
2. Visualizzare il menu *Configurazione > Interfaccia utente*.
3. Passare al sottomenu *Blocco alimentazione*.
4. Selezionare *Attivato/Disattivato* secondo necessità, quindi confermare.

5.4 Menu stato di alimentazione

Spia dello stato di alimentazione

Per impostazione predefinita, quando si accende lo schermo, la spia di stato dell'alimentazione si affievolisce. Questo comportamento può essere modificato in modo che tale spia sia **verde** quando si accende lo schermo.



Quando lo schermo è in modalità stand-by, la spia di stato dell'alimentazione diventerà sempre arancione, anche quando è disattivata.

Per attivare/disattivare la spia di stato dell'alimentazione:

1. Visualizzare il menu principale OSD.
2. Visualizzare il menu *Configurazione > Interfaccia utente*.
3. Passare al sottomenu *Stato alimentazione*.
4. Selezionare *Attivare/Disattivare* secondo necessità, quindi confermare.

5.5 Modalità DPMS

Modalità DPMS

Attivando la modalità Display Power Management System (DPMS) del display si ottimizzerà la durata utile diagnostica disattivando automaticamente la retroilluminazione stessa quando lo schermo non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo. Per impostazione predefinita, la modalità DPMS è attivata sullo schermo, ma deve essere attivato anche sulla workstation. Per eseguire questa operazione, visualizzare la finestra "Opzioni risparmio energia" della workstation.



Barco consiglia di impostare l'attivazione del DPMS trascorsi 20 minuti di inattività.

Per attivare/disattivare la modalità DPMS sullo schermo:

1. Visualizzare il menu principale OSD.
2. Visualizzare il menu *Configurazione Gestione dell'energia*.
3. Passare al sottomenu *Modalità DPMS*.
4. Selezionare *Attivare/Disattivare* secondo necessità, quindi confermare.

5.6 Funzionalità dello schermo

Informazioni sulla funzionalità dello schermo

I pannelli nativi non corretti visualizzeranno tutti i livelli in scala di grigi con aumenti di luminanza che non sono ottimali per dati diagnostici essenziali. Tuttavia gli studi hanno dimostrato che nelle immagini medicali determinate parti in scala di grigi contengono maggiori informazioni diagnostiche rispetto ad altre. Pertanto, sono state definite delle funzioni di visualizzazione. Queste funzioni mettono in evidenza queste parti contenenti importanti informazioni diagnostiche correggendo il comportamento del pannello naturale.

Nativa	Se si seleziona Nativa, il comportamento naturale del pannello non verrà corretto.
Dyn. Gamma 1.8 Dyn. Gamma 2.2	Si tratta di funzioni gamma che consentono di prendere in considerazione la luminanza diversa da zero di un pannello LCD in presenza di un segnale "nero". Queste funzioni sono particolarmente utili nelle applicazioni TC per migliorare la percezione di valori Hounsfield bassi.
DICOM	DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) è uno standard internazionale sviluppato per migliorare la qualità e la comunicazione delle immagini digitali in radiologia. In poche parole, la funzione di visualizzazione DICOM fornisce scale di grigi più visibili nelle immagini. Barco consiglia di selezionare la funzione di visualizzazione DICOM per la maggior parte delle applicazioni di diagnostica per immagini.
Utente - Qaweb	Questa funzione sarà automaticamente selezionata quando si definiscono le funzioni di visualizzazione tramite MediCal QAWeb.
Gamma 1.8 Gamma 2.2	Selezionare una di queste funzioni di visualizzazione se lo schermo deve sostituire uno schermo CRT con gamma di 1,8 o 2,2 rispettivamente.

Per selezionare una funzione di visualizzazione:

1. Visualizzare il menu principale OSD.
2. Visualizzare il menu *Configurazione > Calibrazione*.
3. Passare al sottomenu *Funzione display*.
4. Selezionare una delle funzioni di visualizzazione disponibili, quindi confermare.

5.7 Target di luminanza

Target di luminanza

Il target di luminanza di NIO 3MP LED Display è regolabile in base a un intervallo predefinito. Quando si modifica il target di luminanza, lo schermo adatterà la retroilluminazione per raggiungere tale valore.

Per impostare il target di luminanza:

1. Visualizzare il menu principale OSD.
2. Visualizzare il menu *Configurazione > Calibrazione*.
3. Passare al sottomenu *Target luminanza*.
4. Impostare un valore target di luminanza secondo necessità, quindi confermare.



Il valore della luminanza DICOM calibrata predefinito di fabbrica è disponibile nella tabella delle specifiche tecniche. La durata garantita della retroilluminazione è valida per questa impostazione.

5.8 Modalità di visualizzazione

Informazioni sulla modalità di visualizzazione

È possibile utilizzare NIO 3MP LED Display in due modalità di visualizzazione:

Diagnostica	Questa modalità offre la completa luminanza calibrata ed è progettata per utilizzare lo schermo per scopi diagnostici.
Testo	In questa modalità, la luminanza viene ridotta a circa la sua metà. È progettata per l'utilizzo del display con applicazioni da ufficio come l'elaborazione testi. La modalità testo non è definitiva: dopo lo spegnimento, l'unità si riavvia in modalità diagnostica.



Poiché NIO 3MP LED Display è concepito per essere utilizzato in ambiente diagnostico, è necessario selezionare sempre la modalità diagnostica.

Per selezionare una modalità di visualizzazione:

1. Visualizzare il menu principale OSD.
2. Visualizzare il menu *Configurazione > Calibrazione*.
3. Passare al sottomenu *Modalità di visualizzazione*.
4. Selezionare *Diagnostica/Testo* secondo necessità, quindi confermare.

5.9 Sala di lettura

Sala di lettura



La sala di lettura può essere selezionata solo quando è selezionata la funzione di visualizzazione DICOM. Pertanto, fare riferimento a "Funzionalità dello schermo", pagina 22 per impostare correttamente la funzione di visualizzazione.

L'American Association of Physicists in Medicine (AAPM) ha composto un elenco di sale di lettura predefinite. Ciascuna di queste sale di lettura è definita dai seguenti parametri:

- luce massima consentita in questo tipo di sala

Le sale di lettura disponibili per lo NIO 3MP LED Display sono:

Cam. oscura	Corrisponde alle condizioni di luce di un'ideale camera oscura. Questa impostazione disabilita la compensazione della luce ambiente.
CR/DR/MAMMO	Corrisponde alle condizioni di illuminazione delle sale di lettura per applicazioni diagnostiche quali radiologia computerizzata, radiologia digitale o mammografia. Questa impostazione presenta la luce ambiente massima più bassa.
TC/MR/NM	Corrisponde alle condizioni di illuminazione delle sale di lettura per applicazioni diagnostiche quali tomografia computerizzata, risonanza magnetica o indagini di medicina nucleare.

Ufficio del personale	Corrisponde alle condizioni di illuminazione degli studi medici.
Sala per gli esami clinici	Corrisponde alle condizioni di illuminazione delle sale di lettura per gli esami clinici.
Sala di pronto soccorso	Corrisponde alle condizioni di illuminazione delle sale di pronto soccorso.
Sala operatoria	Corrisponde alle condizioni di illuminazione delle sale operatorie. Questa impostazione presenta la luce ambiente massima più elevata.

Per selezionare una sala di lettura:

1. Visualizzare il menu principale OSD.
2. Visualizzare il menu *Configurazione > Calibrazione*.
3. Passare al sottomenu *Sala di lettura*.
4. Selezionare una delle sale di lettura disponibili, quindi confermare.

5.10 Segnale in ingresso

Segnali di ingresso

Per impostazione predefinita, NIO 3MP LED Display rileva automaticamente e mostra la sorgente di ingresso video collegata. Tuttavia, quando per esempio è collegata più di una sorgente di ingresso video, potrebbe essere necessario selezionare manualmente la sorgente di ingresso da visualizzare.

I segnali di ingresso disponibili per lo schermo sono:

Automatico	L'ingresso viene automaticamente selezionato.
DVI	L'ingresso corrispondente al connettore DVI.
DP	L'ingresso corrispondente al connettore DisplayPort.

Per selezionare manualmente un segnale di ingresso:

1. Visualizzare il menu principale OSD.
2. Visualizzare il menu *Configurazione > Origine immagini*.
3. Passare al sottomenu *Segnale in ingresso*.
4. Selezionare uno dei segnali di ingresso disponibili, quindi confermare.

5.11 Orientamento schermo

Orientamento delle immagini

Il display rileva automaticamente il suo orientamento fisico (verticale od orizzontale) e in base a esso, per impostazione predefinita, regola automaticamente l'orientamento delle immagini. Ciò significa che quando il display viene fisicamente ruotato, l'immagine ruoterà di conseguenza.

Il menu OSD tuttavia consente di non considerare questo comportamento e di forzare l'orientamento delle immagini in verticale od orizzontale a prescindere dall'orientamento del display. Questa funzionalità è particolarmente utile quando si utilizza il display con lo schermo rivolto verso l'alto.

Per impostare l'orientamento dello schermo

1. Visualizzare il menu principale OSD.

2. Visualizzare il menu *Configurazione > Origine immagini*.
3. Passare al sottomenu *Orientamento display*.
4. Selezionare *Orizzontale/Verticale/Automatico* secondo necessità, quindi confermare.

5.12 Intervalli EDID

Intervalli EDID

Per NIO 3MP LED Display sono disponibili i seguenti intervalli EDID:

Frequenza di aggiornamento	Consente di selezionare manualmente tra una frequenza di aggiornamento bassa, media o alta del segnale di ingresso video dell'origine delle immagini in base alla massima frequenza di aggiornamento della scheda video collegata allo schermo.
Orientamento preferito	Consente di modificare l'orientamento del segnale di ingresso video dell'origine delle immagini in orizzontale, verticale o di consentire allo schermo di assegnare automaticamente il corretto orientamento.
Intensità colori	Consente di modificare l'intensità dei colori fino a 8 o 10 bit.

Per impostare manualmente gli intervalli EDID:

1. Visualizzare il menu principale OSD.
2. Visualizzare il menu *Configurazione > Origine immagini*.
3. Passare al sottomenu *Intervalli EDID*.
4. Selezionare *Frequenza di aggiornamento, Orientamento o Intensità colori*.
5. Selezionare una delle impostazioni disponibili, quindi confermare.

5.13 RGB->Y

Informazioni su RGB -> Y

RGB ->Y è una modalità di conversione in cui il grigio viene inviato tramite il canale dei rossi, verdi e blu. Viene eseguita per mezzo di un meccanismo di conversione standard in cui si utilizza il 30% dei rossi, il 59% dei verdi e l'11% dei blu per generare il grigio. La modalità di conversione può essere attivata o disattivata.

Per attivare/disattivare RGB->Y:

1. Visualizzare il menu principale OSD.
2. Visualizzare il menu *Configurazione > Origine immagini*.
3. Accedere al sottomenu *RGB->Y*.
4. Selezionare *Attivare/Disattivare* secondo necessità, quindi confermare.

5.14 Informazioni di visualizzazione

Informazioni di visualizzazione

In un sottomenu dedicato del menu OSD sono disponibili il numero seriale dello schermo, il tipo di colore, la risoluzione nativa, le versioni firmware, ecc.

Per recuperare le informazioni relative allo schermo:

1. Visualizzare il menu principale OSD.
2. Visualizzare il menu *Informazioni sul Display* per vedere le informazioni sullo schermo.

5.15 Stato del display

Stato del display

Il sottomenu Stato del menu OSD fornisce informazioni sullo stato corrente dello schermo (runtime, temperature, ecc.), sullo stato delle origini di immagini collegate (modalità di codifica video, intervalli, ecc.) e lo stato di calibrazione corrente dello schermo (funzione di visualizzazione, luminanza, ALC, ecc.) e lo stato dei collegamenti attivati.

Per recuperare lo stato dello schermo:

1. Visualizzare il menu principale OSD.
2. Visualizzare il menu *Stato*.
3. Passare al sottomenu *Display, Origine immagini > Configurazione, Origine immagini > Intervalli o Calibrazione* secondo necessità.

6. MANUTENZIONE

Informazioni generali per la manutenzione

NIO 3MP LED Display non richiede alcuna attività di manutenzione programmata. Si consiglia di utilizzare QAWeb insieme alle frequenze e ai test predefiniti di Barco per calibrare ed eseguire la manutenzione o restituire il display a una società autorizzata di Barco per la manutenzione. In caso di dubbi, contattare la Barco Healthcare Division.

6.1 Istruzioni per la pulizia

Per pulire il display

Pulire il display utilizzando una spugna, panno per pulire o un tessuto morbido, leggermente inumidito con acqua corrente.

Non utilizzare i seguenti prodotti:

- Alcol/solventi a concentrazione > 5%
- Liscivia, solventi forti
- Acidi
- Detergenti con fluoruro
- Detergenti con ammoniaca
- Detergenti abrasivi
- Lana di acciaio
- Spugne abrasive
- Lame in acciaio
- Panni con fibre in acciaio



ATTENZIONE: Fare attenzione a non danneggiare o graffiare il vetro anteriore o il pannello LCD. Prestare attenzione ad anelli o altri gioielli e non applicare eccessiva pressione sul vetro anteriore o sul pannello LCD.



ATTENZIONE: Non applicare o spruzzare liquidi direttamente sul cabinet, in quanto una quantità eccessiva di liquido può provocare danni ai componenti elettronici interni. Versare il liquido su un panno per la pulizia.

7. INFORMAZIONI IMPORTANTI

7.1 Informazioni di sicurezza

Raccomandazioni generali

Leggere le istruzioni d'uso e di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo.

Conservare le istruzioni d'uso e di sicurezza per poterle consultare in futuro.

Attenersi a tutti gli avvisi presenti sul dispositivo e nel manuale di istruzioni.

Seguire tutte le istruzioni per l'uso.

Scosse elettrico o rischio di incendio

Per evitare scosse elettriche o il rischio di incendio, non rimuovere il coperchio.

L'apparecchio non contiene componenti che possono essere riparati. Per la manutenzione, affidarsi a personale qualificato.

Non esporre mai l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Modifiche all'unità:

Non modificare questo apparecchio senza l'autorizzazione del produttore.

Tipo di protezione (elettrica):

Display con alimentatore esterno: apparecchio di Classe I

Grado di sicurezza (miscela anestetica infiammabile):

Apparecchio non idoneo per l'utilizzo in presenza di miscele anestetiche infiammabili con aria, ossigeno o protossido d'azoto.

Apparecchio non destinato ad ambienti di trattamento dei pazienti

- Apparecchio destinato principalmente a strutture sanitarie in ambienti in cui il contatto con il paziente è improbabile (nessun componente applicato).
- L'apparecchio non può essere utilizzato con apparecchiature di supporto vitale.
- L'utente non deve toccare contemporaneamente l'apparecchiatura, né le porte dei segnali di ingresso (SIP)/uscita (SOP) e il paziente.

Collegamento dell'alimentazione - apparecchio con alimentatore esterno 24 V CC

- Requisiti di alimentazione: l'apparecchio deve essere alimentato mediante l'alimentatore da 24 V CC (==) SELV approvato per applicazioni mediche fornito in dotazione.
- L'alimentatore in CC (==) approvato per applicazioni mediche deve essere collegato alla tensione di rete in CA.
- L'alimentatore è specificato quale parte dell'apparecchiatura ME o la combinazione è specificata come sistema ME.
- Per evitare il rischio di scossa elettrica, questo apparecchio deve essere collegato solo alla rete elettrica con messa a terra di protezione.
- L'apparecchio deve essere installato accanto a una presa facilmente accessibile.
- L'apparecchio è progettato per un funzionamento ininterrotto.

Sovratensione transitoria

Se non si usa l'apparecchiatura per un periodo prolungato, scollegarla dalla presa CA per evitare danni conseguenti a sovratensione transitoria.

Per disinserire completamente l'alimentazione dal dispositivo, scollegare il cavo elettrico dalla presa CA.

Cavi di alimentazione:

- Utilizzare un cavo che soddisfi la tensione della presa di alimentazione, approvata e conforme allo standard di sicurezza del proprio Paese.
- Non sovraccaricare le prese di corrente o i cavi di prolunga in quanto ciò può provocare incendi o scosse elettriche.
- Protezione dei cavi di rete: i cavi di alimentazione devono essere disposti in modo da non essere calpestati o premuti da oggetti collocati sopra o contro di essi, facendo particolare attenzione ai cavi in prossimità di spine e prese.
- Il cavo di alimentazione deve essere sempre sostituito solo dall'operatore designato.

Affidabilità di terra

L'affidabilità della messa a terra può essere raggiunta quando l'apparecchiatura è connessa a una presa equivalente contrassegnata dalla dicitura "Hospital Only" o "Hospital Grade" (ubicata sul prodotto o sul cavo di alimentazione).

Apparecchiatura esterna

Le apparecchiature esterne da collegare all'ingresso di segnale o ad altri connettori dovranno essere conformi allo standard UL/EN/IEC di pertinenza (ad esempio UL/EN/IEC 60950 per apparecchiature IT e serie ANSI/AAMI ES/EN 60601-1/IEC 60601 per apparecchiature medicali elettriche). Inoltre, tutte queste combinazioni (sistemi) dovranno essere conformi allo standard IEC 60601-1, requisiti di sicurezza per sistemi elettrici medicali. Le apparecchiature non conformi allo standard ANSI/AAMI ES/EN/IEC 60601-1 dovranno essere tenute fuori dell'ambiente paziente, così come definito nello standard.

Le apparecchiature non conformi allo standard IEC 60601 dovranno essere tenute fuori dell'ambiente paziente, così come definito nello standard per almeno 1,5 metri dal paziente o dal supporto del paziente.

Chiunque colleghi l'apparecchiatura esterna all'ingresso e all'uscita di segnale o ad altri connettori crea un sistema ed è pertanto responsabile della conformità del sistema stesso ai requisiti IEC 60601-1. In caso di dubbi, contattare un tecnico esperto.

In luoghi dove si utilizzano uscite a 240 V, collegare il display solo a un alimentatore monofase, a 240 V, con presa centrale.

Acqua e umidità

Non esporre mai lo schermo alla pioggia o all'umidità.

Non utilizzare mai lo schermo in prossimità di acqua, ad esempio nei pressi di vasche da bagno, lavabi, piscine, lavatoi o in scantinati umidi.

Ventilazione

Non coprire o ostruire i fori di ventilazione presenti nel cabinet dell'apparecchio. Se si installa il dispositivo in un armadietto, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente tra l'apparecchio stesso e i lati dell'armadietto.

Installazione

Porre il dispositivo su una superficie piana, solida e stabile in grado di sostenere il peso di almeno 3 dispositivi. L'utilizzo di carrelli o altri supporti instabili può provocare la caduta del dispositivo e pertanto lesioni gravi ad adulti o bambini, nonché gravi danni al dispositivo stesso.

L'apparecchio è conforme alle seguenti normative:

CE (prodotto MDD 93/42/CEE classe II b), CE - 2014/30/EU, 2014/108/EC (la direttiva 2004/108/EC è abrogata con effetto dal 20 aprile 2016), IEC 60601-1:2005+A1:2012, ANSI/AAMI ES60601-1

(2005/(R)2012 +A1:2012+C1:2009/(R)2012 + A2:2010/(R)2012) ,CAN/CSA-C22.2 N. 60601-1:14, DEMKO - EN 60601-1:2006/A1:2013, GB9254-2008,GB4943.1-2011, GB17625.1-2012, KC, VCCI, FCC classe B, ICES-001 Livello B, FDA 510 (k), RoHS.

Deroghe nazionali scandinave per CL 1.7.2:

Finlandia: "Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan"

Norvegia: "Apparatet må tilkoples jordat stikkontakt"

Svezia: "Apparaten skall anslutas till jordat uttag"

7.2 Informazioni ambientali

Informazioni per lo smaltimento

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)



Questo simbolo sul prodotto indica che, in ottemperanza alla Direttiva Europea 2012/19/EU che regola lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti comunali. Le apparecchiature da smaltire devono essere conferite presso un apposito centro di raccolta adibito al riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute delle persone, derivanti dallo smaltimento non controllato dei rifiuti, questi rifiuti vanno separati dagli altri tipi di rifiuti e riciclati in modo responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile dei materiali.

Per maggiori informazioni sulle modalità di riciclo di questo prodotto, rivolgersi al proprio comune o al servizio municipale per la raccolta dei rifiuti.

Per ulteriori dettagli, visitare il sito web Barco all'indirizzo: <http://www.barco.com/en/AboutBarco/weee>

Conformità Turchia RoHS



Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

[Repubblica Turca: in conformità con la normativa WEEE]

中国大陆 RoHS

Continente cinese Mainland RoHS

根据中国大陆《电子信息产品污染控制管理办法》(也称为中国大陆RoHS), 以下部分列出了Barco产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量。中国大陆RoHS指令包含在中国信息产业部MCV标准: "电子信息产品中有毒物质的限量要求"中。

Secondo il "China Administration on Control of Pollution Caused by Electronic Information Products" (denominata anche RoHS del Continente cinese), la tabella seguente elenca i nomi e il contenuto di sostanze tossiche e/o pericolose che il prodotto Barco può contenere. Il RoHS del Continente cinese è incluso nello standard MCV del Ministro del Settore informativo cinese, nella sezione "Limit Requirements of toxic substances in Electronic Information Products".

7. Informazioni importanti

零件项目(名称) Nome componente	有毒有害物质或元素 Sostanze o elementi pericolosi					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr6+	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
印制电路配件 Gruppi di circuiti stampati	X	O	O	O	O	O
液晶面板 Pannello LCD	X	O	O	O	O	O
外接电(线)缆 Cavi esterni	X	O	O	O	O	O
内部线路 Cablaggio interno	O	O	O	O	O	O
金属外壳 Custodia in metallo	O	O	O	O	O	O
塑胶外壳 Custodia in plastica	O	O	O	O	O	O
散热片(器) Dissipatori	O	O	O	O	O	O
电源供应器 Alimentatore	X	O	O	O	O	O
风扇 Ventola	O	O	O	O	O	O
文件说明书 Manuali cartacei	O	O	O	O	O	O
光盘说明书 Manuale su CD	O	O	O	O	O	O
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。 O: indica che la sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è al di sotto del limite citato in SJ/T11363-2006.						
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。 X: indica che la sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei utilizzati per la parte supera il limite citato in SJ/T11363-2006.						

在中国大陆销售的相应电子信息产品(EIP)都必须遵照中国大陆《电子信息产品污染控制标识要求》标准贴上环保使用期限(EFUP)标签。Barco产品所采用的EFUP标签(请参阅实例, 徽标内部的编号使用于制定产品)基于中国大陆的《电子信息产品环保使用期限通则》标准。

Tutti i prodotti informatici elettronici (EIP, Electronic Information Products) venduti all'interno del Continente cinese devono essere conformi all' "Electronic Information Products Pollution Control Labeling Standard" del Continente cinese, contrassegnati dal logo EFUP (Environmental Friendly Use Period). Il numero all'interno del logo EFUP che Barco utilizza (fare riferimento alla fotografia) si basa sullo "Standard of Electronic Information Products Environmental Friendly Use Period" del Continente cinese.



Etichetta China Energy

Se sulla confezione o sul prodotto è presente un'etichetta China Energy, il prodotto soddisfa i seguenti requisiti energetici corrispondenti al livello di efficienza energetica indicato sull'etichetta.

按照中国 <<能源效率标识管理办法>> In conformità con il Regolamento di attuazione dell'etichetta China Energy	本显示器符合以下要求 Questo monitor è conforme ai seguenti requisiti	本显示器符合以下要求 Questo monitor è conforme ai seguenti requisiti
能源效率等级 Livello di efficienza energetica	1	2
能源效率 Efficienza energetica (cd/W)	> 1,05	> 0,85
关闭状态能耗 Consumo energetico in modalità Off (W)	< 0,5	< 1,0
执行的能源效率国家标准编号 Code of National Standard applicato	GB 21520	GB 21520

7.3 Informazioni di conformità normativa

Indicazioni d'uso

NIO 3MP LED Display (MDNG-3220) è destinato all'utilizzo per la visualizzazione di immagini digitali (escluse le immagini di mammografia digitale) per fini di esame e analisi da parte di personale medico qualificato.

Attenzione (USA): la legge federale limita la vendita o l'ordine di questo dispositivo a un medico. (Dettagli ed eccezioni sono disponibili nel Codice dei regolamenti federali Titolo 21, 801 Parte D).

FCC Classe B

L'apparecchio è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) l'apparecchio non deve provocare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comportare un funzionamento indesiderato.

I test eseguiti su questo dispositivo ne hanno riscontrato la conformità ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, in applicazione della Parte 15 delle Norme FCC. Scopo di questi limiti è fornire una ragionevole protezione da interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia nella banda della radiofrequenza e, se non installato e usato in accordo con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non esiste tuttavia alcuna

7. Informazioni importanti

garanzia che in impianti specifici non si verifichino interferenze. Se questo dispositivo provoca interferenze dannose alle trasmissioni radiotelevisive, rilevate spegnendo e riaccendendo il dispositivo stesso, si consiglia di provare a eliminare tali interferenze adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e l'antenna ricevente.
- Collegare il dispositivo a una presa di corrente su un circuito diverso da quello dell'antenna ricevente.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo esperto per ulteriori suggerimenti in merito.

Variazioni o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero rendere nulla l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Avviso di conformità per il Canada

Questo dispositivo ISM è conforme allo standard ICES-001 canadese.

Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 du Canada.

7.4 Avviso EMC

Informazioni generali

Nessun requisito specifico sull'uso di cavi esterni o altri accessori eccetto l'alimentatore.

Con l'installazione del dispositivo, utilizzare l'alimentatore in dotazione o la parte di ricambio fornita dal produttore legale. L'uso di un altro può determinare una riduzione del livello di immunità del dispositivo.

Emissioni elettromagnetiche

NIO 3MP LED Display è progettato per l'impiego nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente di NIO 3MP LED Display dovrà assicurare l'impiego in tale ambiente.

Test sulle emissioni	Conformità	Ambiente elettromagnetico - Indicazioni
Emissioni RF CISPR 11	Gruppo 1	NIO 3MP LED Display utilizza l'energia a radiofrequenza solo per funzioni interne. Pertanto, le emissioni RF sono molto basse e probabilmente non causano alcuna interferenza alle apparecchiature elettroniche circostanti.
Emissioni RF CISPR 11	Classe B	NIO 3MP LED Display può essere impiegato in tutti gli edifici, inclusi quelli residenziali e direttamente collegati alla rete elettrica pubblica a bassa tensione utilizzata negli edifici per scopi domestici
Emissioni armoniche IEC 61000-3-2	Classe D	
Fluttuazioni di tensione/sfarfallii emessi IEC 61000-3-3	Conforme	

NIO 3MP LED Display è conforme ai pertinenti standard EMC medici in materia di emissioni verso e interferenze da apparecchiature circostanti. Il suo funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) l'apparecchio non deve provocare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comportare un funzionamento indesiderato.

L'interferenza può essere determinata accendendo e spegnendo le apparecchiature.

Se questo apparecchio provoca interferenze dannose o è soggetto a interferenze dannose provenienti da apparecchiature circostanti, si consiglia di provare a eliminare tali interferenze adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente o l'apparecchiatura.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e l'antenna ricevente.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello dell'antenna ricevente.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico esperto per ulteriori suggerimenti in merito.

Immunità elettromagnetica

NIO 3MP LED Display è progettato per l'impiego nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente di NIO 3MP LED Display dovrà assicurare l'impiego in tale ambiente.

Test di immunità	IEC 60601 Livelli di prova	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - Indicazioni
Scariche elettrostatiche (ESD) IEC 61000-4-2	± Contatto 6kV ± Aria 8kV	± Contatto 6kV ± Aria 8kV	I pavimenti devono essere in legno, calcestruzzo oppure ricoperti di piastrelle ceramiche. Se il pavimento è ricoperto di materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno pari al 30%
EFT/Burst IEC 61000-4-4	±2 kV per linee di alimentazione ±1 kV per linee di input/output	±2 kV per linee di alimentazione ±1 kV per linee di input/output	La qualità dell'alimentazione di rete deve corrispondere a quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero
Sovratensione IEC61000-4-5	± 1 kV da linea/e a linea/e ± 2 kV da linea/e a terra	± 1 kV da linea/e a linea/e ± 2 kV da linea/e a terra	La qualità dell'alimentazione di rete deve corrispondere a quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero
Cali di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione sulle linee di ingresso dell'alimentatore IEC 61000-4-11	< 5% U_T ¹ (calo > 95% in U_T) per 0,5 cicli 40% U_T (calo 60% in U_T) per 5 cicli 70% U_T (calo 30% in U_T) per 25 cicli < 5% U_T (calo > 95% in U_T) per 5 s	< 5% U_T (calo > 95% in U_T) per 0,5 ciclo 40% U_T (calo 60% in U_T) per 5 cicli 70% U_T (calo 30% in U_T) per 25 cicli < 5% U_T (calo > 95% in U_T) per 5 s	La qualità dell'alimentazione di rete deve corrispondere a quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Se l'utente di NIO 3MP LED Display ha bisogno di un funzionamento continuo durante interruzioni di corrente, si raccomanda di alimentare NIO 3MP LED Display con un gruppo di continuità o una batteria.
Campo magnetica con frequenza di alimentazione (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	Non applicabile ²	I campi magnetici con frequenza di alimentazione devono avere livelli caratteristici di una sede tipica in un ambiente commerciale od ospedaliero tipico.
RF condotta	3 Vrms	3 V	I dispositivi portatili e mobili per le

1. è la tensione di rete ca precedente all'applicazione del livello di prova.

2. NIO 3MP LED Display non contiene componenti suscettibili ai campi magnetici

7. Informazioni importanti

Test di immunità	IEC 60601 Livelli di prova	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - Indicazioni
IEC 61000-4-6 RF irradiata IEC 61000-4-3	Da 150 kHz a 80 MHz 3 V/m Da 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m	comunicazioni non devono essere usati oltre la distanza raccomandata dai componenti di NIO 3MP LED Display, tra cui i cavi, calcolata in base all'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore. Distanza di separazione raccomandata $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$ da 80 MHz a 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ da 800 MHz a 2,5 GHz Dove P è il valore massimo nominale di potenza in uscita del trasmettitore in watts (W) in base a quanto dichiarato dal produttore del trasmettitore e d è la distanza di separazione raccomandata in metri (m). Le intensità di campo di trasmettitore RF fissi, determinati da un'analisi del sito elettromagnetico,³ deve essere inferiore al livello di conformità di ogni intervallo di frequenza.⁴ Possono verificarsi delle interferenze vicino ad apparecchiature contrassegnate dal simbolo: 

3. Le intensità di campo di trasmettitore fissi, come stazioni base per radiotelefoni (cellulari/cordless) e radio mobili da campo, radio amatoriali, trasmissioni radio in AM e FM e trasmissioni TV non sono, in teoria, prevedibili con precisione. Per valutare l'ambiente elettromagnetico dovuto ai trasmettitori RF fissi, è necessario considerare l'analisi elettromagnetica del sito. Se l'intensità di campo misurata nel luogo in cui NIO 3MP LED Display viene utilizzato supera l'applicabile livello di conformità RF summenzionato, è necessario sottoporre a osservazione NIO 3MP LED Display per verificarne il normale funzionamento. Nel caso si osservino prestazioni anomale, potrebbero essere necessarie ulteriori misure, come il riorientamento o il riposizionamento di NIO 3MP LED Display.

4. A intervalli di frequenza compresi tra 150 kHz e 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.



A 80 MHz e 800 MHz si applica l'intervallo di frequenza superiore.



Queste linee guida non si possono applicare a tutte le situazioni. Sulla propagazione elettromagnetica influisce l'assorbimento e il riflesso di strutture, oggetti e persone.

Distanza di separazione raccomandata

NIO 3MP LED Display è progettato per essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi di radiofrequenza irradiati sono controllati. Il cliente dell'utente di NIO 3MP LED Display può contribuire a prevenire l'interferenza elettromagnetica mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature portatili e mobili per comunicazioni RF (trasmettitori) e NIO 3MP LED Display indicato in precedenza, secondo l'emissione di potenza massima dell'apparecchiatura per le comunicazioni.

Potenza di emissione massima nominale del trasmettitore ⁵ W	Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore		
	Da 150 kHz a 80 MHz $d=1,2\sqrt{P}$	Da 80 MHz a 800 MHz $d=1,2\sqrt{P}$	Da 800 MHz a 2,5 GHz $d=2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23



A 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione per la portata di frequenza più alta.



Queste linee guida non si possono applicare a tutte le situazioni. Sulla propagazione elettromagnetica influisce l'assorbimento e il riflesso di strutture, oggetti e persone.




7.5 Spiegazione dei simboli

Simboli presenti sul dispositivo

Sul dispositivo o sull'alimentatore possono essere presenti i seguenti simboli (elenco non esaustivo):

5. Per i trasmettitori con potenza nominale massima non elencata in precedenza, la distanza di separazione consigliata in metri (m) può essere stimata utilizzando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore. Dove P è il valore nominale di potenza in uscita massimo del trasmettitore in watts (W) in base a quanto dichiarato dal produttore del trasmettitore.

7. Informazioni importanti

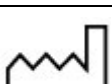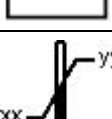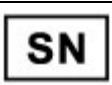
	Indica la conformità alla direttiva 93/42/CEE per i dispositivi di Classe I
	Indica la conformità alla direttiva 93/42/CEE per i dispositivi di Classe II
	Indica la conformità con la Parte 15 delle Regole FCC (Classe A o Classe B)
	Indica che il dispositivo è conforme alle norme UL
	Indica che il dispositivo è conforme alle norme UL per il Canada e gli Stati Uniti
	Indica che il dispositivo è conforme alle norme UL Demko
	Indica che il dispositivo è conforme alle norme CCC
	Indica che il dispositivo è conforme alle norme VCCI
	Indica che il dispositivo è conforme alle norme KC
	Indica che il dispositivo è conforme alle norme BSMI
	Indica le porte USB sul dispositivo
	Indica le porte DisplayPort sul dispositivo
	Indica la data di produzione
	Indica le limitazioni termiche ⁶ per un uso sicuro del dispositivo in conformità alle specifiche.
	Indica il numero di serie del dispositivo

6. I valori di xx e yy sono disponibili nella sezione dedicata alle specifiche tecniche.


	Avviso: tensione pericolosa
	Attenzione
	Consultare il manuale di istruzioni
	Indica che il dispositivo non deve essere gettato tra i rifiuti, ma riciclato in conformità alla Direttiva Europea WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
	Indica Corrente Continua (CC)
	Indica Corrente Alternata (CA)
	Standby
	Equipotenzialità

Simboli presenti sulla scatola

Sulla scatola del dispositivo possono essere presenti i seguenti simboli (elenco non esaustivo):

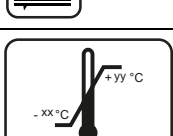	Indica un dispositivo per uso medicale che può rompersi se non manipolato con attenzione durante la conservazione.
	Indica un dispositivo per uso medicale che deve essere protetto dall'umidità durante la conservazione.
	Indica la direzione di conservazione della scatola. La scatola deve essere trasportata, gestita e conservata in modo che le frecce siano sempre rivolte verso l'alto.
	Indica il numero massimo di scatole impilabili una sull'altra.
	Indica che la scatola deve essere trasportata da due addetti.
	Indica che la scatola non deve essere tagliata con un coltello, un taglierino o qualsiasi altro oggetto affilato.
	Indica i limiti di temperatura a cui il dispositivo per uso medicale può essere esposto in sicurezza durante la conservazione.

7. Informazioni importanti

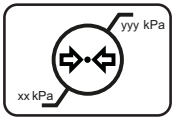	Indica l'intervallo di umidità a cui il dispositivo per uso medico può essere esposto in sicurezza durante la conservazione.
	Indica l'intervallo di pressione atmosferica a cui il dispositivo per uso medico può essere esposto in sicurezza durante la conservazione.

7.6 Liberatoria

Declinazione di responsabilità

Sebbene sia stato fatto quanto possibile per garantire la correttezza dei dati tecnici contenuti in questo documento, decliniamo qualunque responsabilità per eventuali errori presenti. Il nostro obiettivo è fornire la documentazione più precisa e fruibile possibile; invitiamo pertanto l'utente a segnalare eventuali errori individuati.

I prodotti software Barco sono di proprietà di Barco. Tali prodotti sono distribuiti con copyright di Barco N.V. o Barco, Inc. per l'esclusivo utilizzo in conformità ai termini specifici di un contratto di licenza software tra Barco N.V. o Barco, Inc. e l'utente. Non sono autorizzati altri usi, duplicazioni o divulgazioni di prodotti software Barco in alcuna forma.

Le specifiche dei prodotti Barco sono soggette a modifiche senza preavviso.

Marchi

Tutti i marchi e i marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Nota sul copyright

Questo documento è protetto da copyright. Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento non potrà essere riprodotto o copiato, in tutto o in parte, in alcuna forma e con alcun mezzo (grafico, elettronico o meccanico tra cui fotocopie, registrazioni su nastro, supporti di memorizzazione o sistemi di recupero dati) senza il consenso scritto di Barco.

© 2014 Barco N.V. Tutti i diritti riservati.

Informazioni brevetto

Il prodotto è protetto dai seguenti diritti di proprietà intellettuale:

Brevetto statunitense RE43,707

7.7 Specifiche tecniche

Informazioni generali

Acronimo del prodotto	MDNG-3220
Tecnologia dello schermo	IPS
Dimensioni dello schermo attive (diagonale)	520 mm (20,8")
Dimensioni dello schermo attive (O x V)	318 mm x 424 mm (12,52" x 16,69")
Rapporto di aspetto (O:V)	4:3
Risoluzione	3MP (2048 x 1536)
Passo pixel	0,207

Immagini a colori	No
Immagini in grigio	Sì
Numero di scale di grigi (LUT in ingresso/LUT in uscita)	1.024 livelli di grigio (10/12)
Angolo di visuale (O, V)	88°
Uniform Luminance Technology (ULT)	Sì
Per Pixel Uniformity (PPU)	No
Ambient Light Compensation (ALC)	No
Backlight Output Stabilization (BLOS)	Sì
Sensore anteriore	Sì
Luminanza massima	1.200 cd/m ² tipico
Luminanza calibrata DICOM (ULT disattivato)	500 cd/m ²
Rapporto di contrasto (ULT disattivato)	1.200 tipico
Tempo di risposta (Tr + Tf)	30 ms (tipico)
Frequenza di scansione (O; V)	15-129 kHz; 25-98 Hz
Colore alloggiamento	Bianco/Nero
Segnali di ingresso video	DVI-D Dual Link/DisplayPort
Segnali uscita video	DisplayPort
Terminali di ingresso video	ND
Porte USB	1 upstream, 2 downstream
Standard USB	2.0
Requisiti di alimentazione (nominali)	100-240V
Consumo energetico (nominale)	50 W
Modalità di risparmio energetico	Sì
Gestione dell'energia	DVI-DMPM
Dot-clock	280 MHz
Lingue OSD	Inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo, italiano, cinese (semplificato), giapponese, coreano
Dimensioni con supporto (L x A x P)	Verticale: (l x a max x p) 378 x 628 x 235 mm (l x a min x p): 378 x 528 x 235 mm Orizzontale: (l x a max x p): 491 x 572 x 235 mm. (l x a min x p) 491 x 472 x 235 mm
Dimensioni senza supporto (L x A x P)	378 x 491 x 84 mm
Dimensioni dell'imballo (L x A x P)	495 x 388 x 655 mm
Peso netto con supporto	13 kg
Peso netto senza supporto	8 kg
Peso netto imballo con supporto	17 kg
Peso netto imballo senza supporto	12 kg
Gamma di regolazione altezza	100 mm
Inclinazione	-10° / +30°
Rotazione	-45° / +45°

7. Informazioni importanti

Funzione pivot	90°
Montaggio standard	VESA (100 mm)
Protezione schermo	Protezione in vetro non riflettente
Modalità raccomandate	TC, MR, US, DR, CR, NM, Pellicola
Certificazioni	CE (prodotto MDD 93/42/CEE classe II b), CE - 2014/30/EU, 2014/108/EC (la direttiva 2004/108/EC è abrogata con effetto dal 20 aprile 2016), IEC 60601-1:2005+A1:2012, ANSI/AAMI ES60601-1 (2005/(R)2012 +A1:2012+C1:2009/(R)2012 + A2:2010/(R)2012), CAN/CSA-C22.2 N. 60601-1:14, DEMKO - EN 60601-1:2006/A1:2013, GB9254-2008, GB4943.1-2011, GB17625.1-2012, KC, VCCI, FCC classe B, ICES-001 Livello B, FDA 510 (k), RoHS.
Accessori in dotazione	Manuale dell'utente
	Guida rapida di installazione
	Cavi video (1 x DVI Dual Link + 1 x DisplayPort)
	Cavo di alimentazione cinese (CCC)
	Cavo USB 2.0
	Questi adattatori sono parte integrante del dispositivo medicale. (Fabbricante: BridgePower Corporation, Modello: BPM060S24F09; Ingresso: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,5 A; Uscita: + 24 V CC (==), 2,7 A)
Accessori opzionali	Nessuno
Software QA	MediCal QAWeb
Unità per pallet	ND
Dimensioni pallet (L x A)	ND
Garanzia	5 anni
Temperatura di esercizio	da 0°C a 35°C (da 15°C a 30°C entro le specifiche)
Temperatura di conservazione e trasporto	da -20 °C a 60 °C
Umidità di esercizio	8% - 80% (senza condensa)
Umidità di conservazione e trasporto	5% - 85% (senza condensa)
Altitudine di esercizio	2.000 m
Pressione di conservazione e trasporto	7.500 m

8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

8.1 Risoluzione dei problemi

Generali

In caso di problemi con il display LCD, fare riferimento ai seguenti argomenti per la risoluzione dei problemi. Se il problema persiste, rivolgersi al centro di assistenza o al fornitore di zona.

Problema: nessuna immagine visualizzata sullo schermo

- Premere il pulsante Standby.
- Verificare che tutti i connettori I/O e di alimentazione siano collegati correttamente, come illustrato all'interno della sezione "installazione".
- Accertarsi che i pin dei connettori non siano deformati o rotti.

Problema: immagine parziale o non visualizzata correttamente

- Verificare se la risoluzione del computer è più elevata di quella del display.
- Riconfigurare la risoluzione del computer per ridurla o renderla pari alla risoluzione nativa (1600 x 1200)

8.2 Segnali di avvertenza

Generali

Spesso possono essere visualizzati messaggi di avvertenza per il display. Ciò significa che il display non è in grado di ricevere correttamente il segnale dalla scheda grafica del computer.

Problema: assenza di segnale

Questo messaggio indica che il display è stato acceso, tuttavia non è in grado di ricevere segnali dalla scheda grafica del computer. Controllare tutti gli interruttori di alimentazione, i cavi di alimentazione e il cavo video.

Problema: fuori portata

Questo messaggio indica che il segnale della scheda grafica del computer non è compatibile con il display. Sul display viene visualizzato tale messaggio quando il segnale non è incluso nella modalità di compatibilità riportata nelle appendici del presente manuale.